



Compacta, desmontable y veloz ¡ la mejor solución para una vida activa!

Las reducidas dimensiones y el concepto modular de la *Invacare Bora* le llevarán allá donde quiera ir y con toda seguridad. Esta silla es única tanto por sus resultados de conducción - con motores de hasta 10 km/h - como por su fácil desmontaje que le permite caber en los maleteros más pequeños sin necesidad de utilizar una rampa. Los motores SSD de alto rendimiento en combinación con las baterías de gel de 40 Ah como estándar proporcionan un 10% más de autonomía así como un mantenimiento simplificado.

Trusted Solutions, Passionate People





Funcional y desmontable para facilitar el mantenimiento y el transporte

Gracias a su construcción robusta y práctica, el asiento se desacopla de la base motriz y las baterías se quitan con gran facilidad, deslizando sobre unas guías. Por lo tanto, la **Bora** puede ser transportada en un vehículo pequeño sin necesidad de usar rampas. Esto permite también un fácil acceso a las partes mecánicas y electrónicas para reparar la silla.

Compacta y maniobrable

Gracias a sus dimensiones reducidas, la silla electrónica **Bora** es tan manejable en interiores como en exteriores y en espacios reducidos. Eligiendo las ruedas de 8", el ancho total de la silla es de 580 mm para facilitar el paso entre puertas.

Confort y resultados de conducción óptimos

La posición del centro de gravedad, el tamaño de las ruedas y la electrónica permiten superar bordillos de 60 mm (sin subebordillos). Además, las suspensiones proporcionan un confort ideal en suelos irregulares. La silla **Bora** está disponible en 2 versiones :

Interior: con motores de 6 Km/h y ruedas delanteras de 8" (ancho total: 590 mm).

Exterior: con motores de 10 km/h y ruedas delanteras de 9" (ancho total: 620 mm) (versión estándar).

Características y opciones



Respaldo desmontable

Para facilitar el transporte. Es ajustable en ángulo y en profundidad sin intervalos. Tapizado bicolor negro/gris ajustable en tensión



Desacoplar la Unidad de asiento

Es un juego de niños: Tirar de la correa trasera, levantar el asiento y desconectar el cable del mando. El respaldo es fácilmente desmontable con palomillas.



Ancho total reducido (versión interior)

Gracias a las ruedas delanteras de 8" se consigue un ancho total de 590 mm para facilitar el paso de la silla entre las puertas.



Baterías extraíbles

Para conseguir un fácil acceso a la electrónica, las baterías se sacan de forma individual, deslizándose sin esfuerzo sobre unas guías. Además, la conexión se hace de forma automática.

Características y opciones



Unidad de asiento Invacare Modulite™



- ① **Placa de asiento estándar** con anchura fija y profundidad ajustable sin intervalos
- ② **Asiento rígido**, compuesto de 3 placas, regulable en anchura y en profundidad sin intervalos
- ③ **Asiento ajustable en tensión**, compuesto de 9 cinchas ajustables en tensión. Regulable en profundidad sin intervalos



- ① Respaldo con tapizado **ajustable en tensión** bicolor y bolsillo trasero
- ② Respaldo **Rea Flex3** ajustable en anchura y en altura
- ③ Respaldo rígido **Matrix**.

Respaldo abatible

Cuando se pide la opción de reclinación eléctrica, el respaldo se abate fácilmente sobre el asiento gracias a un mecanismo de "quick release" del pistón que facilita su transporte.



Reposabrazos abatibles y desplazables

Dos nuevos tipos de reposabrazos están disponibles con los asientos **Modulite™**:

- ① abatibles, para facilitar las transferencias
- ② abatibles y desplazables para mantener un posicionamiento adecuado de los miembros superiores durante la basculación de asiento



Elevación con basculación eléctricas (opcional)

Elevación de asiento de hasta 300 mm incluyendo basculación hasta 30°. Altura asiento-suelo reducida de 450 mm.

2 tipos de ruedas

Rueda delantera de 8" (con motores de 6 km/h) o de 9" (con motores de 10 km/h) según uso interior o exterior.



Suspensiones

El confort y los buenos resultados de conducción están garantizados por las suspensiones laterales, incluso a alta velocidad. 2 tipos de suspensiones disponibles : estándar o reforzada.



Fácilmente desmontable

En 4 elementos para facilitar su transporte. El respaldo se desmonta en pocos segundos mediante palomillas. También se puede abatir sobre el asiento cuando se pide opción de reclinación eléctrica.



Soportes de cadera ajustables

Disponible como opción en diferentes tallas con el asiento **Modulite™**.



G-Trac™ - estabilidad en el camino

La nueva tecnología **G-Trac™** (opcional) actúa como una brújula electrónica (giroscopio)- garantizando que la dirección indicada por el mando sea seguida por la silla de ruedas a pesar de los obstáculos, desniveles, baches, cambios de tipo de suelo que modifican la trayectoria de la silla y disminuyen la tracción. El módulo **G-Trac™** proporciona más confort, más seguridad y reduce el cansancio del usuario.

Datos técnicos*

Modulite™ Placa de asiento	440 - 480 mm ¹	410 - 510 mm	450 mm ³	480 mm	275 - 340 mm	290 - 470 mm ^{3,4}
Modulite™ Asiento telescópico	380 - 530 mm ²	410 - 510 mm	450 mm ³ / 450 - 750 mm ^{3,10}	480, 540, 560 mm ^{3,11}	245 - 310 mm	290 - 470 mm ^{3,4} 0 - 20° / 0 - 30° ¹⁰

Modulite™ Placa de asiento	90° - 120°	590 / 620 mm ⁵	930 mm	1160 mm ⁶ 1210 mm ¹⁰	820 / 840 mm ⁵	98 kg ⁹
Modulite™ Asiento telescópico	90° - 120°	590 / 620 mm ⁵	970 mm	1160 mm ⁶ 1210 mm ¹⁰	820 / 840 mm ⁵	94 kg ⁹

40 Ah 50 Ah	1600 mm 1630 mm ¹⁰	60 mm ⁷	18% (10°)	2 x 230 W	30 km ⁸	6 / 10 km/h

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.


- 1/ Cojín de asiento de 430mm
- 2/ 50mm adicionales con los ajustes del apoyabrazos
- 3/ Medido sin cojín de asiento / tapizado
- 4/ Depende del tipo de reposapiés
- 5/ El ancho y largo de la silla depende del diámetro de las ruedas delanteras

- 6/ Incluyendo reposapiernas estándar
- 7/ 100 mm con kit subebordillos
- 8/ De acuerdo con ISO 7176-4:2008
- 9/ El ancho total depende de la configuración
- 10/ Con elevación de asiento o módulo de basculación
- 11/ Dependiendo del respaldo elegido



Invacare® Modulite™

Color chasis

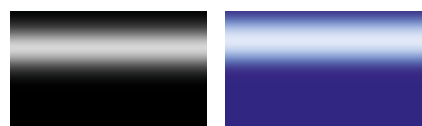

Negro Azul transparente



Rojo eléctrico Gris metalizado



En el manual de usuario de la silla encontrará más información, datos técnicos, referencias para el transporte o la descripción de ciertas opciones.